

イミグランキット皮下注3mg 医療機関内使用時のお願いならびに 「使用済みカートリッジ廃棄ケース」のご案内

～使用済みカートリッジの別の患者さんへの誤使用・針刺し事故を防ぐために～

謹啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品の「イミグランキット皮下注3mg」に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社では、医療機関において医療従事者が患者さんへ投与する際、使用済みカートリッジの誤投与防止を目的としてご活用いただける「イミグランキット皮下注3mg専用 使用済みカートリッジ廃棄ケース」を作製いたしましたので、ご案内申し上げます。貴施設において本製剤を施注される方々へ、本件についてご案内いただきますようお願い申し上げます。

イミグランキット皮下注3mgは、1つのカートリッジパックに、2本のカートリッジが個別に封入されている構造です。1本目のカートリッジは、使用後に同カートリッジパックに戻す仕様のため、廃棄するまで、使用済みカートリッジと未使用カートリッジが1つのカートリッジパック内で一時的に保管されます。

医療機関において本剤を使用される際に、**使用済みカートリッジを別の患者さんに誤って使用した**との報告を複数受けております。弊社としては、本剤をより安全にご使用いただくため、**複数の患者さんに使用されることは推奨しておりません。**

やむを得ず複数の患者さんに使用される場合は、**使用済みカートリッジの誤使用を防ぐためにも本廃棄ケースを使用**していただき、使用済みカートリッジは速やかに廃棄くださいますようお願い申し上げます。

今後も弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

イミグランキット皮下注3mg専用
使用済みカートリッジ
廃棄ケース



医療機関用 GSK

**イミグランキット皮下注3mg専用
使用済みカートリッジ
廃棄ケース**

イミグランキット皮下注3mgの使用済みカートリッジを廃棄するための専用ケースです。ほかの用途に使用しないでください。ご使用前に、次ページからの説明をご確認ください。

ご注意ください

使用済みカートリッジを廃棄ケースに格納したら、必ず**すぐに蓋をして**ください。

蓋が開いたままの場合、針などが落下する可能性があります。この廃棄ケースは、必ず**感染性廃棄物**として廃棄してください。

グラクソ・スミスクライン 株式会社

イミグランキット皮下注3mg専用
使用済みカートリッジ
廃棄ケース 使用説明書

使用説明書は廃棄ケースと同梱されています。ご使用前にご確認ください。



医療機関でイミグランキット皮下注3mgを使用される場合の廃棄方法

Check 1 投与時のお願い



本製剤を複数の患者さんに使用されることは推奨しておりません。

Check 2 廃棄ケースを使用して廃棄



やむを得ず複数の患者さんに使用される場合は、使用済みカートリッジの誤使用を防ぐためにも、本廃棄ケースを使用して、速やかに廃棄ください。

① 1本目：廃棄ケースに入れて廃棄

② 2本目：元のカートリッジパックに戻して廃棄

カートリッジパックに戻し、感染性廃棄物として廃棄ください。



カートリッジパックには戻さず、廃棄ケースに格納後は**すぐに蓋をして**、感染性廃棄物として廃棄ケースごと廃棄ください。

【廃棄ケースの使い方】下記**1**～**3**をご確認ください。

廃棄ケースの使い方

使用説明書は廃棄ケースと同梱されています。ご使用前にご確認ください。

1 廃棄ケースの蓋を開けて**平面に置き**、注射後のカートリッジの針先が完全に隠れるように、ペン型注入器ごと差し込みます。その後、廃棄ケースを持ち、支えて奥までしっかり差し込んでください。


※ペン型注入器の先端から注射針が出ており、針刺し事故を起こす可能性があるため、廃棄ケースにペン型注入器の先端が十分に入ったことを確認してから、廃棄ケースを支えるようにしてください。



2 廃棄ケースを立て、ペン型注入器を反時計回りに回し、廃棄ケースからペン型注入器を引き上げます。(使用済みカートリッジが廃棄ケースに残ります)

※蓋内側に回す方向を表示しています。

※この際、廃棄ケースを下向きに傾けたりすると、針などが落下する可能性があります。

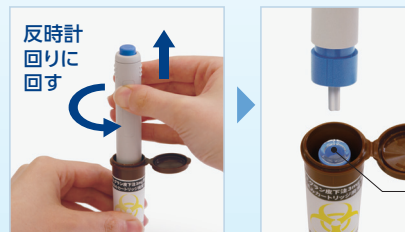

3 廃棄ケースに**すぐに蓋をします**。蓋が完全に閉まったことを確認し、感染性廃棄物として、廃棄ケースごと廃棄してください。ペン型注入器はキャリアケースに戻してください。



使用済みカートリッジ

廃棄ケースの使い方の動画はこちら



<https://gskpro.com/ja-jp/products-info/imigran/disposalcase/>

